



TRUE SOURCE
for HealthCare

TS-UF05-4242-1

淳碩 自充型PU氣囊座墊

Self-inflating Cushion (TPU+Foam)



保固一年

舒適 輕巧 減壓 便攜

淳碩 自充型PU氣囊座墊

Self-inflating Cushion (TPU+Foam)

TS-UF05-4242-1



36個PU氣囊內充滿高彈性泡棉立方體

從壓縮狀態到空氣吸入展開後關閉氣閥，坐上以微漏方式調節軟硬之喜好



內部泡棉來預防觸底可壓縮空間
間可自充吸入空氣恢復空間

座罩四向彈性

尺寸: L 42xL 42xH 5cm

產品總重: 550g

最大載重: 120Kg

氣閥

柔軟



溝槽氣道 通風 聚熱少

底部止滑


適用辦公椅、汽車座椅、輪椅、木製椅、塑膠椅、打坐墊、觀眾席、捷運、高鐵、計程車/卡車、火車和飛機長途旅行.....

設定步驟 Set Up

當泡棉恢復能力降低時 可打氣輔助作調整

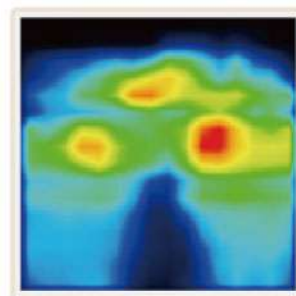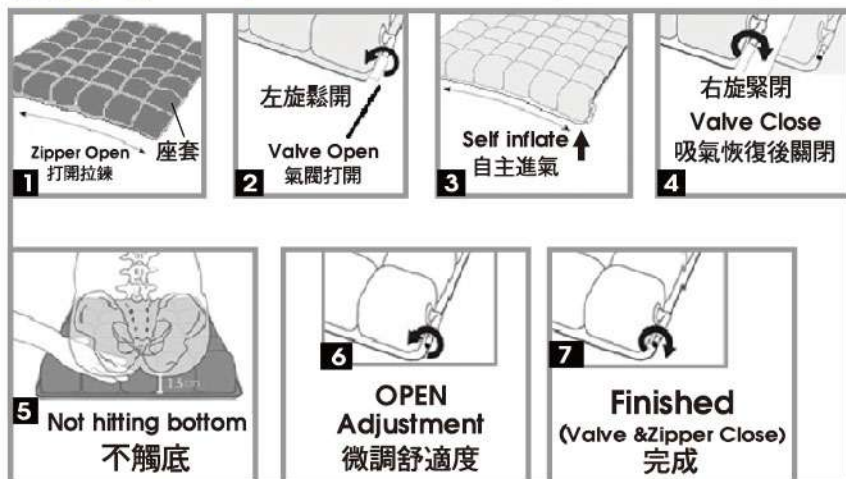

未使用任何緩衝座墊臀部壓力測試圖

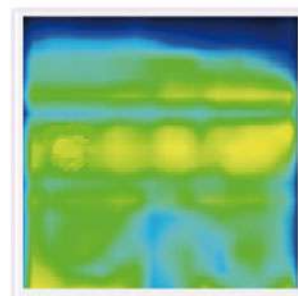

使用UF-05自充座墊壓力測試圖

工作原理 連通管型氣囊

利用流體力學中的「連通管原理」藉由每一個相通的腔室，在遇到注入而來的空氣壓力時，會讓每一個相通的氣囊裡壓力是均等的，自動適形分布，特別較重向下壓力會藉由相通氣囊轉移到別處，減輕其單點壓力



TRUE SOURCE
for HealthCare

製造商:

淳碩科技股份有限公司 服務專線: 0800-820168

新北市新店區民權路130巷3號4樓 www.medical-truesource.com/tw

僅本體保固一年



經銷商